

Haier

海尔生物医疗



海尔危化品软件系统管理方案

——青岛海尔生物医疗股份有限公司



海智安

haier_admin

在线

注销

首页

系统管理

系统监控

用户基础数据

危化品管理

库存管理

标签管理

领用管理

报表管理

库存汇总表

入库明细表

出库明细表

入库汇总表

出库汇总表

报废管理

采购待入库

物料领用管理

物料出入库

出入库记录

入库明细表

出库明细表

页签操作

刷新

产品编号:

产品名称:

CAS号:

生产厂家:

领用人:

领用日期: 开始时间 - 结束时间

搜索

重置

导出

刷新

打印

更多


产品编码	产品名称	标签编码	CAS号	纯度/规格	包装	品牌	生产厂家	供应商	库房名称	设备名称	领用人	领用日期
test002	测试危化品101中文名称	16388585877922061	测试危化品101CAS	test002	test002	test002	test002	test002供应商	测试库房1	库房1设备1	test092702院所名称	2021-12-07 14:31:36
1632793055804	test003名称	16388443007485860	测试危化品101CAS	0.96	500	test003品牌	test003厂商	test003供应商	测试库房1	库房1设备1	test092702院所名称	2021-12-07 11:12:54
1634124568643	苯甲腈	16355604127951840	100-47-0	500ml/瓶	500	齐鲁制药	阿拉丁	-	1号库房	海智安防爆柜-2	章炳磊	2021-10-30 10:45:29
1634124564300	O-苄基羟胺	16341791204041657	622-33-3	5g/瓶	5	齐鲁制药	毕得	-	演示库房	海智安防爆柜-2	-	2021-10-14 10:46:34
1634124564300	O-苄基羟胺	16341791204024201	622-33-3	5g/瓶	5	齐鲁制药	毕得	-	演示库房	海智安防爆柜-2	-	2021-10-14 10:46:34
1634124568657	对硝基甲苯	16341791204358865	99-99-0	100g/瓶	100	齐鲁制药	阿拉丁	-	演示库房	海智安防爆柜-3	-	2021-10-14 10:46:34
test002	测试危化品101中文名称	1633937693439	测试危化品101CAS	test002	test002	test002	test002	test002供应商	测试库房3	库房3设备4	test092702院所名称	2021-10-11 15:37:13
test001编码	test001名称	1633934972766	测试危化品101CAS	0.96	500	test001品牌	test001厂商	test001供应商	测试库房2	库房2设备3	test092702院所名称	2021-10-11 15:09:38


© 2019 Haier Biomedical Copyright



危化品管理系统解决方案

危化品全流程管理 灵活搭载智能硬件 智能化管理

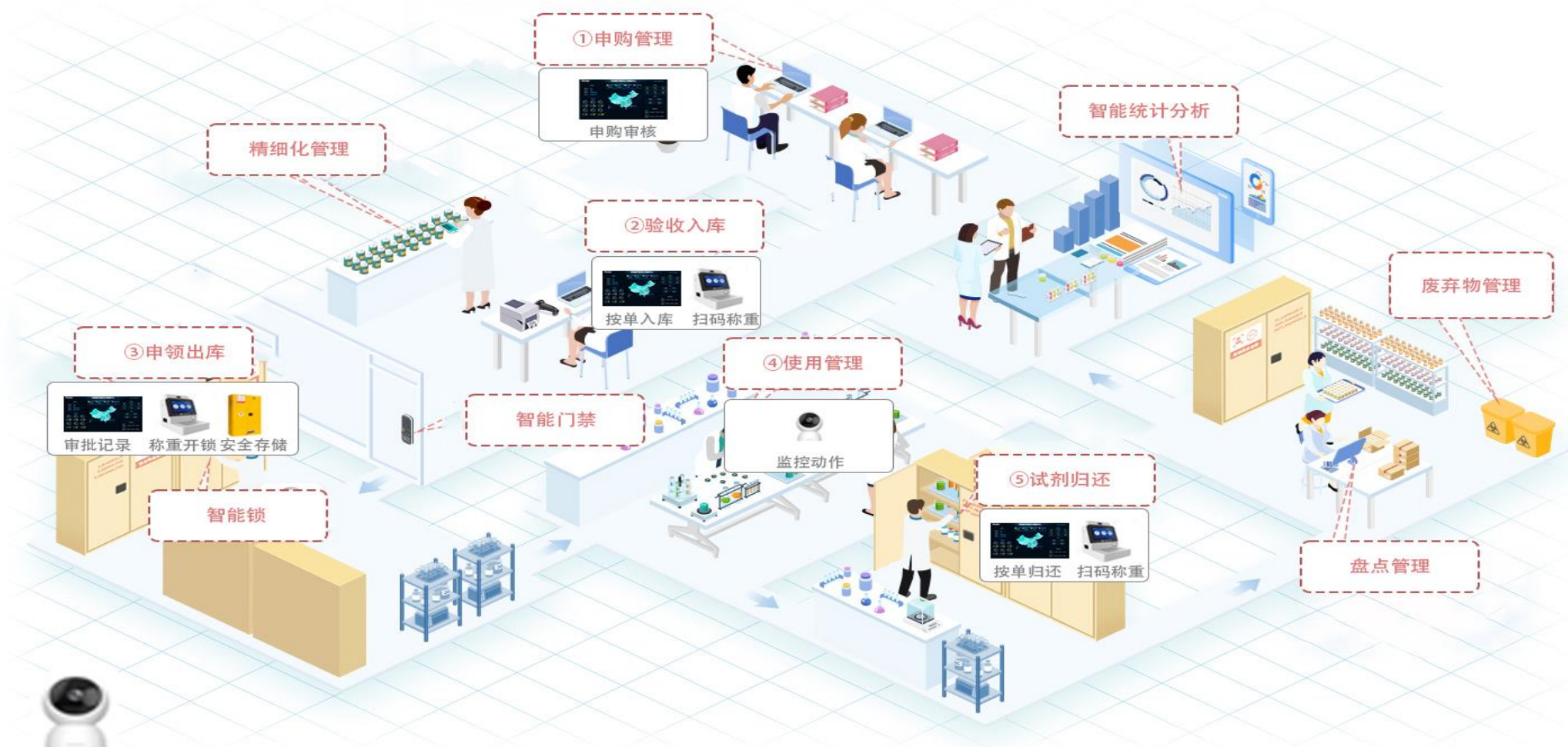

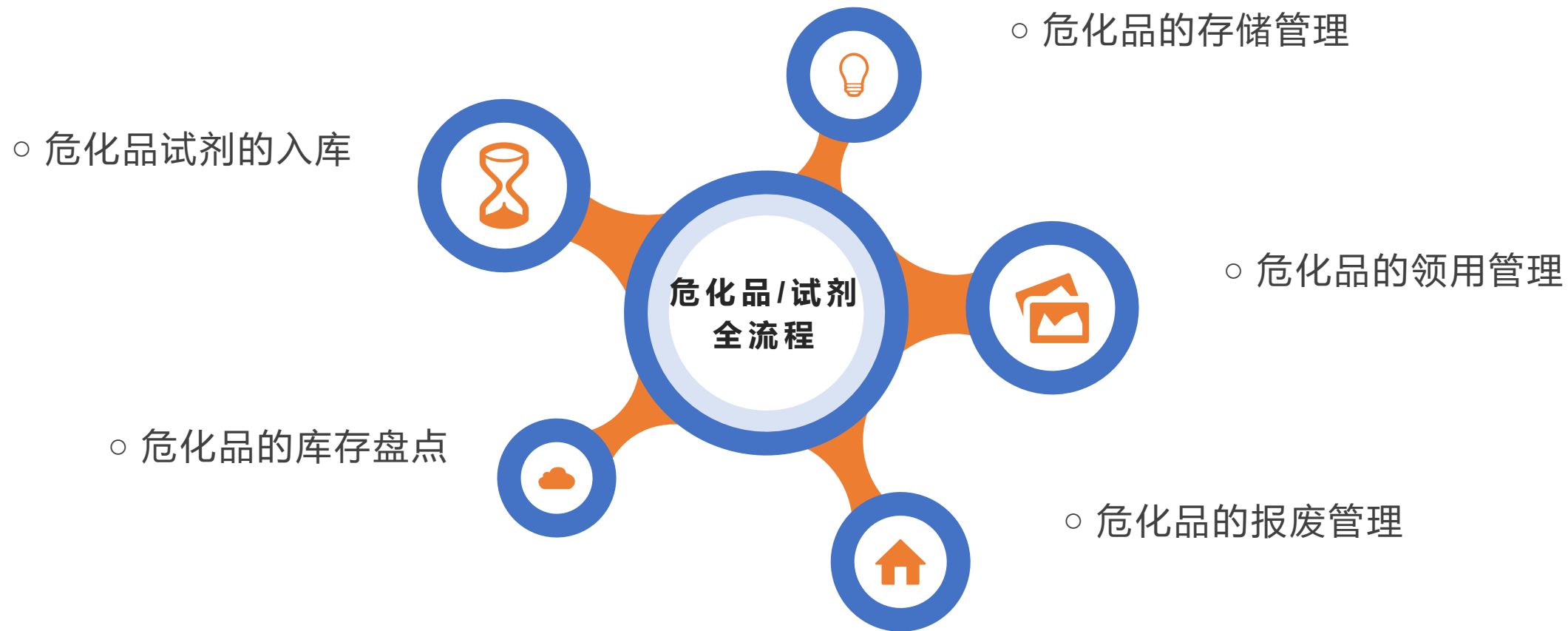



海尔危化品全流程管控平台-申购

根据现有库存量结合历史使用记录及实际使用需求，给出科学采购决策，防止重复采购，多量采购

haier_admin

在线

注销

首页

系统管理

系统监控

用户基础数据

危化品管理

危化品基础资料

危化品管理

危化品库存

库存管理

标签管理

领用管理

报表管理

全屏显示

海尔生物医疗

首页

采购待入库

物料领用管理

用户登录管理

危化品基础资料

危化品库存

危化品管理

页签操作

刷新

产品编号:

产品名称:

CAS号:

生产厂家:

危险类型: 所有

供应商:

搜索

重置

+ 新增

导出

模板下载

批量添加

刷新

打印

列表

产品编号	产品名称	CAS号	纯度/规格	包装	品牌	生产厂商	供应商	危险类型	存储条件	状态	操作
1634124563643	苯甲腈	100-47-0	500ml/瓶	500	齐鲁制药	阿拉丁	-	易燃液体	常温	正常	编辑 停用 详情
1634124563965	高氯酸	7601-90-3	500ml/瓶	500	齐鲁制药	天津大茂	-	氧化剂	常温	正常	编辑 停用 详情
1634124564287	DFBA (4-氟苯胺)	371-40-4	500g/瓶	500	齐鲁制药	AlfaAesar	-	常规化学品	常温	正常	编辑 停用 详情
1634124563645	苯甲醚	100-66-3	500mL/瓶	500	齐鲁制药	天津大茂	-	易燃液体	常温	正常	编辑 停用 详情
1634124563966	过氧化苯甲酰	94-36-0	25g/瓶	25	齐鲁制药	TCI	-	氧化剂	常温	正常	编辑 停用 详情
1634124564288	DL-谷氨酸酰胺	6899-04-3	100g/瓶	100	齐鲁制药	上海赢瑞	-	常规化学品	常温	正常	编辑 停用 详情
1634124563646	苯腈	100-47-0	250ml/瓶	250	齐鲁制药	SIGMA	-	易燃液体	常温	正常	编辑 停用 详情
1634124563967	过氧化苯甲酰	94-36-0	25g/瓶	25	齐鲁制药	TCI	-	氧化剂	常温	正常	编辑 停用 详情
1634124564290	HATU	148893-10-1	20g/瓶	20	齐鲁制药	苏州吴帆	-	常规化学品	常温	正常	编辑 停用 详情
1634124563647	苯乙醇腈	532-28-5	25g/瓶	25	齐鲁制药	阿法埃莎	-	易燃液体	常温	正常	编辑 停用 详情

第 1 到 10 条, 共 1607 条记录。

10 条记录每页

<

1

2

3

4

5

...

161

>

© 2019 青岛海尔生物医疗股份有限公司 Copyright

1.通过录入或导入采购的化学品清单打印标签扫描入库

三

全屏显示

页签操

采购待入库

入库单号: 入库单名称: 创建人: 搜索 重置


+ 新增

采购入库

入库单号	入库单名称	数量	入库单类型	创建时间	创建人	状态	备注	操作
1634179807338	10月14日采购申请	8	补货申请	2021-10-14 10:50:07	演示账号	正常	采购申请	编辑 作废 打印 详情
1634174433893	10月14日入库单	30	自创建	2021-10-14 10:38:40	演示账号	正常	-	打印 详情
1634125047033	演示入库	30	自创建	2021-10-14 09:16:58	演示账号	正常	-	打印 详情
1634125099258	10月13日入库	5	自创建	2021-10-13 19:39:54	演示账号	正常	-	打印 详情

第 1 到 4 条 共 4 条记录

2.通过客户试剂系统与海尔危化品管理系统接口对接,在海尔危化品系统里形成入库单,管理人员通过打印标签,扫描标签或入库单完成入库


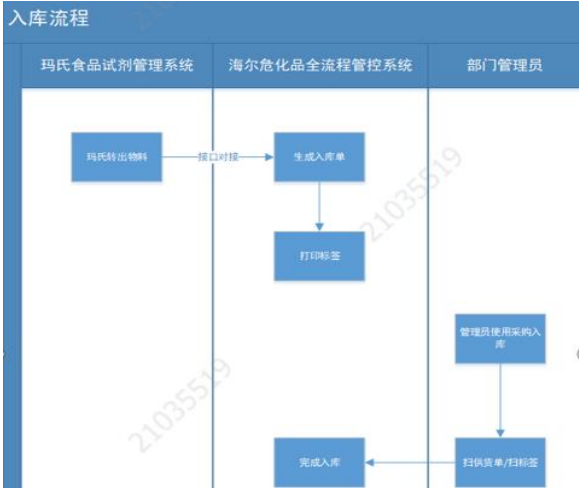


3.通过智能中控平台RFID标签入库，自动录入到危化品管理系统





根据不同危化品的危险属性，分类安全存储化学品和试剂，并可与危化品管理系统完全对接



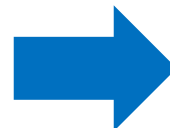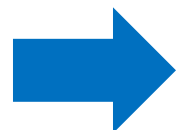

可实现存储设备运行状态物联监控

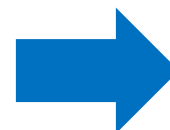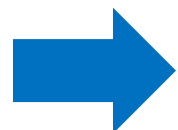

可实现危化品库存管理，提高盘点效率



可实现危化品称重管理，人员领用记录及物品生命周期可追溯

海尔智能危化品管理解决方案可
对**易燃液体、可燃液体、强酸强碱类、易燃气体**规范化分类存储，
充分保障危化品存储安全；实现
危化品合规化管理；

通过危化品管理系统电脑端或手机端发起领用申请,经管理人员审批同意后双人刷卡开锁领取化学品
自动形成领用时间/领用人/领用数量等记录
可直接导出领用汇总表
如果缺少库存,可通过“ 采购申请 ” 进行提报申请采购.

领用申请

添加计划申请

产品列表

产品编号: 产品名称: CAS号:

品牌: 搜索 重置

产品编号	产品名称	CAS号	纯度/规格	包装	品牌	生产厂商	供应商	当前库存
1634124563643	苯甲腈	100-47-0	500ml/瓶	500	齐鲁制药	阿拉丁	-	0
1634124563965	高氯酸	7601-90-3	500ml/瓶	500	齐鲁制药	天津大茂	-	0
1634124564287	DFBA (4-氟苯胺)	371-40-4	500g/瓶	500	齐鲁制药	AlfaAesar	-	0

保存 返回

全屏显示

领用申请 领用记录

申请单号: 产品编号: 产品名称: CAS号:

领用人: 领用日期: 开始时间 结束时间 搜索 重置

导出

申请单号	产品编码	产品名称	标签编码	CAS号	纯度/规格	包装	生产厂家	供应商	领用人	领用日期
-	1634124564300	O-苯基羟胺	16341791204024201	622-33-3	5g/瓶	5	毕得	-	-	-
-	1634124563657	对硝基甲苯	16341791204358865	99-99-0	100g/瓶	100	阿拉丁	-	-	-
-	1634124564300	O-苯基羟胺	16341791204041657	622-33-3	5g/瓶	5	毕得	-	-	-

第 1 到 3 条, 共 3 条记录。

通过危化品管理系统电脑端或手机端发起领用申请,经管理人员审批同意后双人刷卡开锁领取化学品
自动形成出入库记录

海智安

haier_admin

在线 注销

首页

系统管理

系统监控

用户基础数据

危化品管理

库存管理

采购待入库

物料领用管理

物料出入库

出入库记录

报废管理

标签管理

领用管理

报表管理

全屏显示

海尔生物医疗

页签操作

刷新

产品编号:

产品名称:

CAS号:

类型: 所有

操作时间: 开始时间 - 结束时间

搜索

重置

导出

刷新

打印

列表

产品编码	产品名称	标签编码	CAS号	纯度/规格	包装	品牌	当前剩余量	生产厂家	供应商	设备名称	库房名称	类型	操作时间	操作人
test002	测试危化品101中文名称	16388585877922061	测试危化品101CAS	test002	test002	test002	-	test002	test002供应商	库房1设备1	测试库房1	入库	2021-12-07 14:32:34	test092702
test002	测试危化品101中文名称	16388585877922061	测试危化品101CAS	test002	test002	test002	-	test002	test002供应商	库房1设备1	测试库房1	出库	2021-12-07 14:31:36	test092702
test002	测试危化品101中文名称	16388585877922061	测试危化品101CAS	test002	test002	test002	-	test002	test002供应商	库房1设备1	测试库房1	入库	2021-12-07 14:30:26	test092702
1632793055804	test003名称	16388582043965671	测试危化品101CAS	0.96	500	test003品牌	-	test003厂商	test003供应商	库房1设备1	测试库房1	入库	2021-12-07 14:24:45	test092702
1632793055804	test003名称	16388443007485860	测试危化品101CAS	0.96	500	test003品牌	200	test003厂商	test003供应商	库房1设备1	测试库房1	入库	2021-12-07 11:13:37	test092702
1632793055804	test003名称	16388443007485860	测试危化品101CAS	0.96	500	test003品牌	-	test003厂商	test003供应商	库房1设备1	测试库房1	出库	2021-12-07 11:12:54	test092702
1632793055804	test003名称	16388442943736727	测试危化品101CAS	0.96	500	test003品牌	-	test003厂商	test003供应商	库房1设备1	测试库房1	入库	2021-12-07 10:34:46	test092702
1632793055804	test003名称	16388443007485860	测试危化品101CAS	0.96	500	test003品牌	-	test003厂商	test003供应商	库房1设备1	测试库房1	入库	2021-12-07 10:34:46	test092702

© 2019 Haier Biomedical Copyright

危化品报废管理

≡

全屏显示

用户头像 海尔生物

◀

首页

报废管理

▶▶

页签操作

⌵

单号:

报废人:

报废日期:

开始时间

-

结束时间

搜索

重置

+ 新增

↓ 导出

↺

📄

⌵

单号	产品编码	产品名称	标签编码	CAS号	纯度/规格	包装	品牌	生产厂商	供应商	报废时间	报废人	报废原因
1638846986469	1632793055804	test003名称	16388443007485860	测试危化品101CAS	0.96	500	test003品牌	test003厂商	test003供应商	2021-12-07 11:16:26	test092702	空瓶报废
1633937482307	test001编码	test001名称	1633934972766	测试危化品101CAS	0.96	500	test001品牌	test001厂商	test001供应商	2021-10-11 15:31:22	test092703院所名称	空瓶报废
1633937368536	1632793055804	test003名称	1633934972761	测试危化品101CAS	0.96	500	test003品牌	test003厂商	test003供应商	2021-10-11 15:29:29	test20210927	物料变质

第 1 到 3 条, 共 3 条记录。

通过PDA或中控平台快速盘点:
1.比对盘点:适用于设备内化学品品种少,规格相对统一的情况



首页界面



盘点方式选择



比对盘点

通过PDA或智能中控平台快速盘点:

2.扫码盘点:适用于设备内化学品数量和型号比较多的情况,盘点记录自动记录到管理系统
盘点异常情况自动提醒 盘亏/盘盈自动提醒



盘点完成

扫码盘点



盘点完成

异常提醒




盘点完成

盘完确认

RFID快速盘点:

通过给每一个试剂贴上RFID标签的方式进行盘点，自动记录到后台危化品管理系统

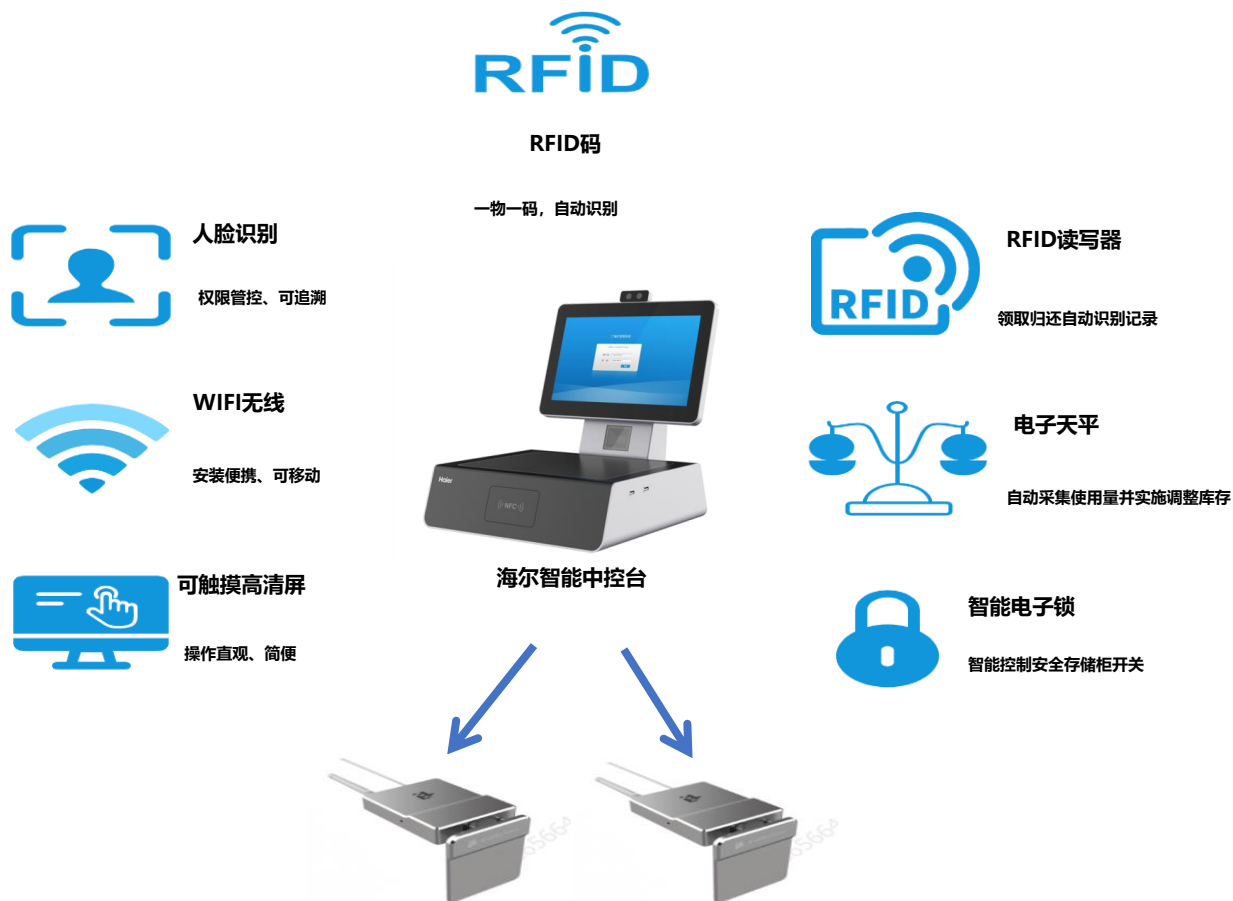

A photograph of the Haier Innovation Center building, a modern structure with a curved, metallic facade. The building is set against a blue sky with light clouds. In the foreground, there is a green lawn with large, blue, three-dimensional letters spelling 'Haier'. To the left, there are trees with green leaves. The slogan '让生活更美好!' is written in white, stylized Chinese characters across the middle of the image.

让生活更美好!

Haier